





MOBILE HOSPITAL

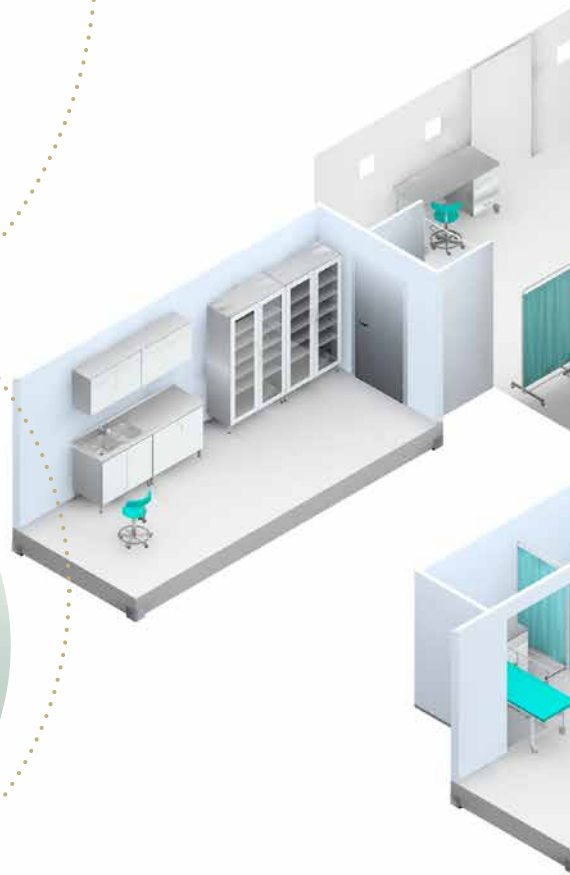

ALVO Medical le oferă clienților săi o soluție modulară completă pentru săli de operație moderne: sisteme de pereți modulari și tavane, uși pentru salile de operație de specialitate, mese de operație, sisteme de transfer pentru pacienți, lumini pentru operație, chiuvete, mobilier medical, dulapuri modulare, retractoare chirurgicale și sisteme integrate pentru salile de operare.

ALVO Mobile Hospital este specializată în fabricarea sistemelor de spitale mobile conform criteriilor medicale universale, pentru utilizare în special în regiunile cu o infrastructură insuficient dezvoltată sau în cazuri de urgență.

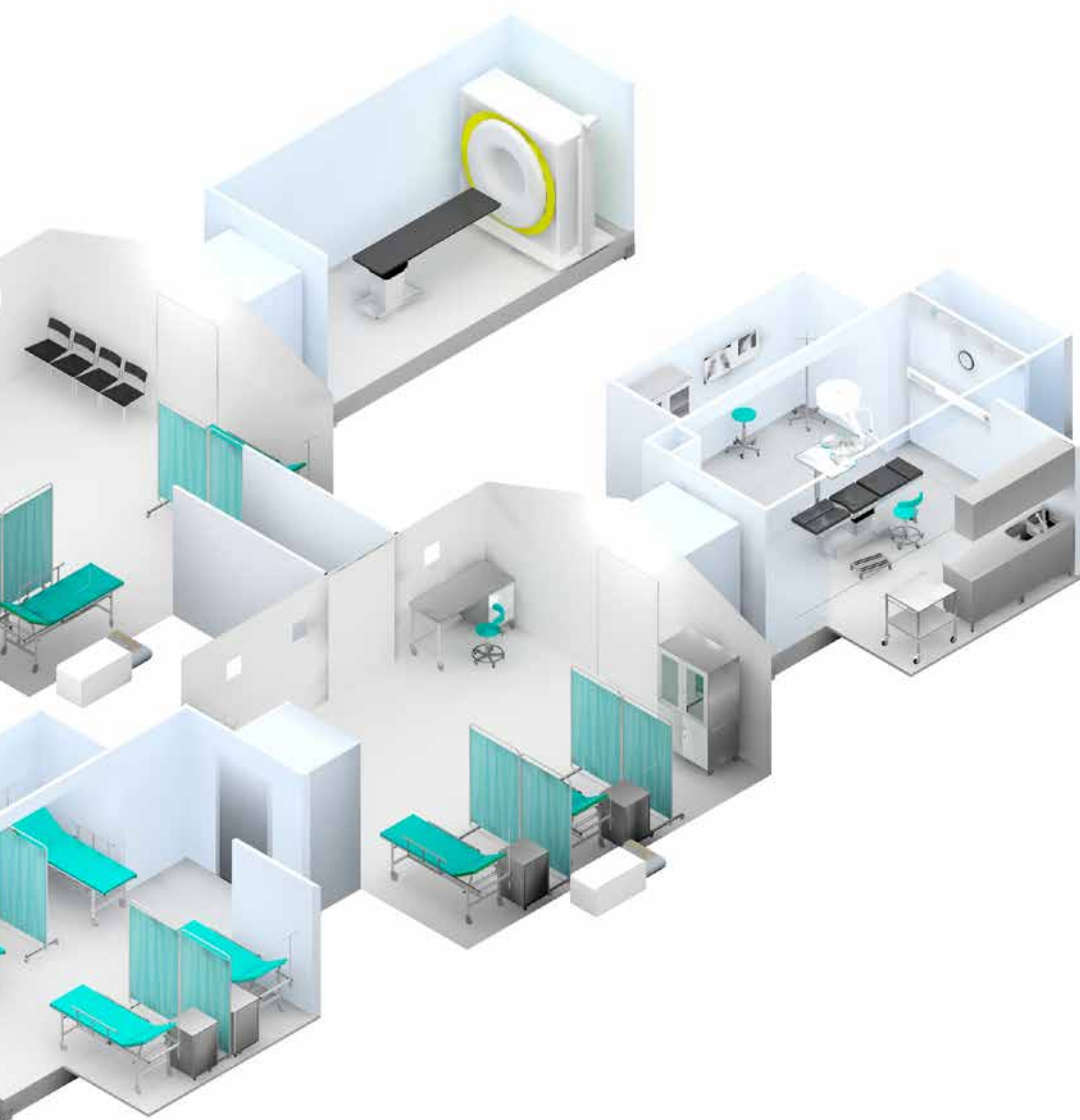


ALVO Mobile Hospital produce și livrează sisteme de spitale mobile conform criteriilor medicale universale, pentru utilizare în special în regiunile cu o infrastructură insuficient dezvoltată sau în cazuri de urgență:

- ▶ Dezastre naturale
- ▶ Programe de cooperare internațională (campanii de sănătate)
- ▶ Războaie
- ▶ Controlul bolilor
- ▶ Atacuri teroriste
- ▶ Demonstrații

Crearea unor condiții mai bune de tratament pentru toată lumea, oriunde în lume, este adânc înrădăcinată în misiunea ALVO. Fiecare produs fabricat de ALVO reflectă aceste valori concentrându-se pe obținerea unor rezultate clinice mai bune. Sălile noastre de operație modulare, igienice și integrate sunt sigure și prietenoase cu utilizatorii lor, cu pacienții și cu mediul natural. Unitățile mobile pot fi instalate ca un singur modul sau ca un sistem complex.

SISTEME DE SPITALE MOBILE

Sistemele ALVO Mobile Hospital oferă o soluție completă pentru unitățile spitalicești mobile în unități solide și cu climă controlată. Fiind o instalație autonomă, aceasta oferă un mediu compact care va fi echivalentul unui spital în caz de urgență sau dezastru. Aceste spitale mobile sunt instalate rapid pentru a oferi un ajutor rapid comunității. Mai multe unități modulare pot fi asamblate prin seturi de coridoare și acționează ca o structură unitară.

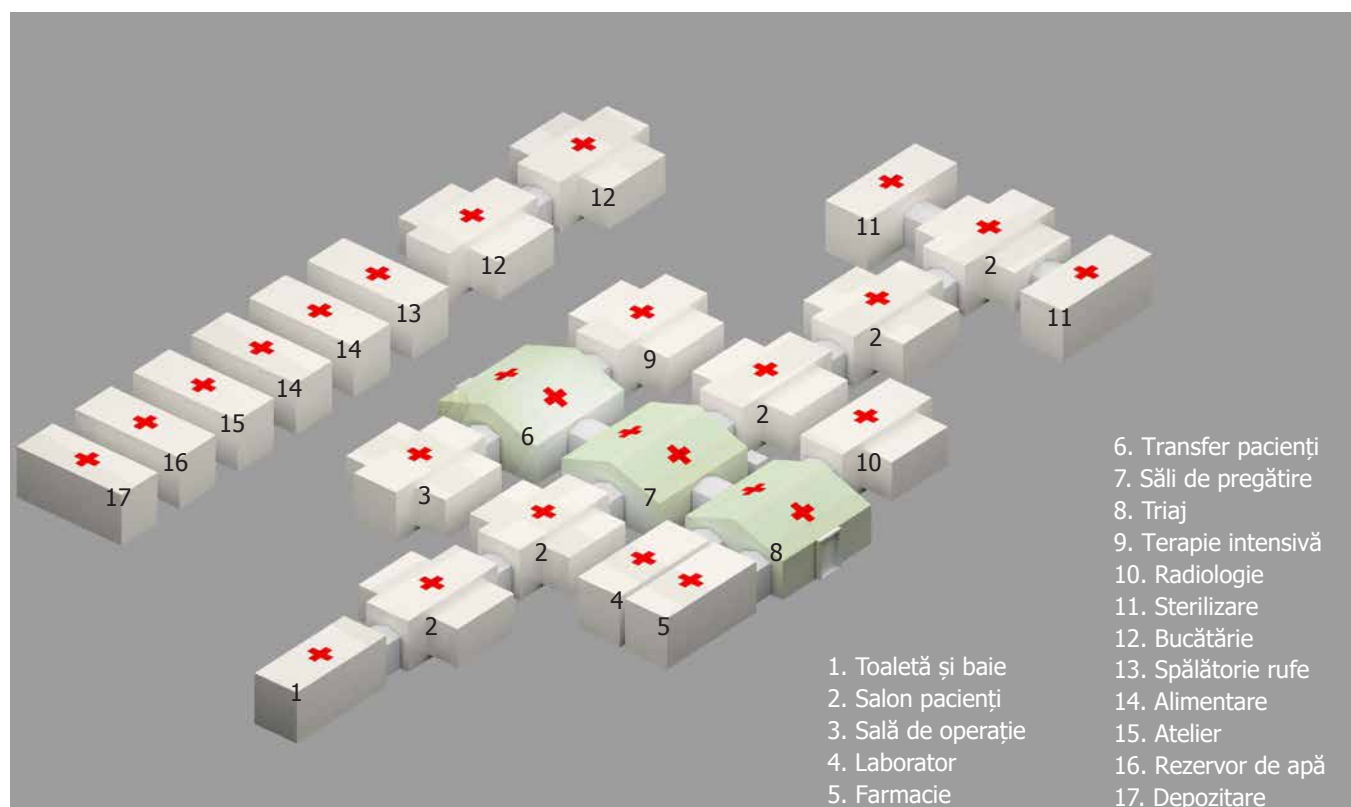

Unitățile spitalicești mobile reglabile și complexe se bazează pe containere de asamblare modulară. Instalarea rapidă și sigură, precum și configurarea individuală, oferă o soluție adaptată cerințelor clientului și necesităților medicale, ceea ce facilitează intervenția rapidă și îngrijirea clinică în zona afectată.



Modulele pot fi folosite ca:

- ▶ Sală de operație
- ▶ Unitate de terapie intensivă
- ▶ Saloane pentru pacienți
- ▶ Săli de pregătire
- ▶ Farmacie
- ▶ Producție de gaz medical
- ▶ Spălătorie rufe
- ▶ Laborator
- ▶ Toaletă și sală de baie
- ▶ Bucătărie
- ▶ Depozitare
- ▶ Unitate pentru apă curată/uzată
- ▶ Sterilizare
- ▶ Triaj
- ▶ Alimentare cu energie
- ▶ Sală de radiologie



INSTALARE


Modulele spitalului mobil pot fi instalate rapid, atât pentru servicii chirurgicale de rutină, cât și ca unitate medicală de urgență. Modulele pot fi relocate în câteva ore, asigurând un mediu de lucru de înaltă calitate și sigur pentru personalul medical, ca într-o unitate medicală obișnuită, într-un timp foarte scurt. Toate unitățile vor fi complet operaționale în mai puțin de o zi.

DIMENSIUNILE CONTAINERELOR


Dimensiunile modulelor sunt conforme standardului ISO 20'. Modulele pot fi transportate pe șasiuri de camioane obișnuite și remorci cu cadru de container de 20', pe mare. Suporturile de ridicare disponibile permit coborârea automată sau manuală a modulelor la sol.

Spitalele mobile pot fi concepute combinând corturi și module de transport pentru un transport și o instalare rapidă. Acestea pot fi asamblate în diferite configurații, răspunzând nevoilor medicale și locale.


CONFIGURAȚII DE BAZĂ

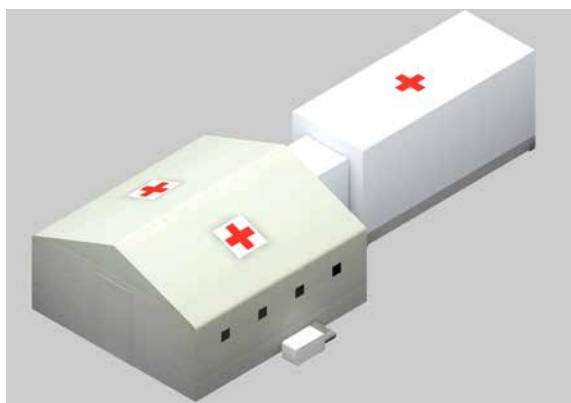

- ▶ Module ALVO 1:1 plus cort

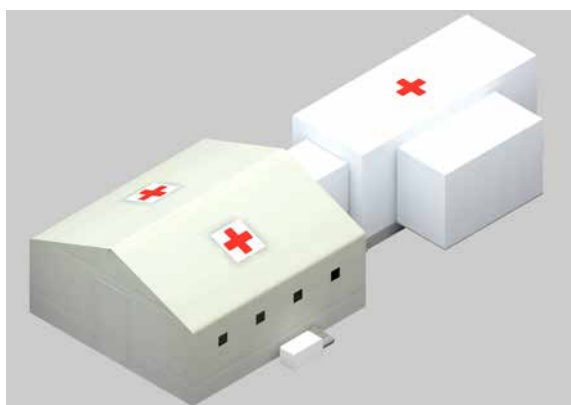

- ▶ Module ALVO 2:1 plus cort

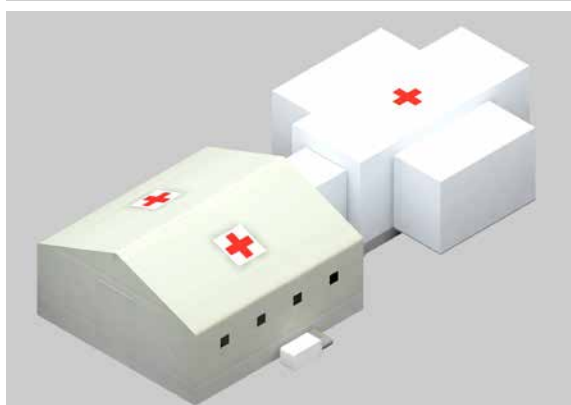

- ▶ Module ALVO 3:1 plus cort



AVANTAJE

- ▶ Instalarea rapidă permite furnizarea rapidă de servicii medicale
- ▶ Mobilitate excepțională pentru transport facil și rapid spre orice destinație și pe orice distanță
- ▶ Compatibilitate garantată pentru orice echipamente medicale fixe
- ▶ Modularitate și capacitatea de a funcționa independent
- ▶ Posibilitate de integrare cu structuri existente
- ▶ Suprafețe ușor de curățat, pentru un control excelent al bolilor
- ▶ Posibilitate de extindere facilă prin adăugarea de module suplimentare
- ▶ Structură independentă, cu energie, iluminat, încălzire, ventilație (filtrare HEPA) integrate, aer condiționat, conducte, gaz medical/vid integrate
- ▶ Interioare personalizate
- ▶ Echipamente medicale certificate: mobilier, mese de operații, iluminat chirurgical, chiuvete, cărucioare, mese de instrumentar, disponibile în oferta producătorului