



Spătar



Suport picioare



Auto contur



Flexare genunchi



Sus / jos



Trendelenburg



Trendelenburg inv.




Scaun cardiac

## SERIA FURNICARE

### FU 45 PAT ELECTRONIC PENTRU TERAPIE INTENSIVĂ, CU COLOANE MOTORIZATE

Paturile de spital FURNICARE sunt concepute cu o combinație de aluminiu și HPL pentru a îmbunătăți igiena și a facilita curățarea. Sunt proiectate pentru a spori controlul infecțiilor și a preveni căderea, fiind ușor de utilizat. Cu o gamă amplă de accesorii, FURNICARE acoperă toate nevoile utilizatorilor.

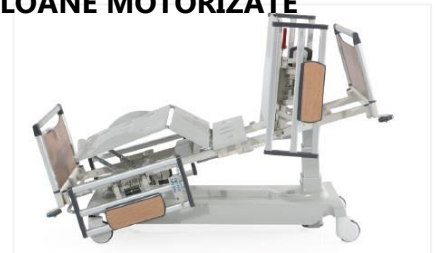

- Motoare Linak pentru coloane
- Spătar acționat electric, reglarea înălțimii și a suportului pentru picioare
- Poziții Trendelenburg și Trendelenburg invers acționate electric
- Poziție fowler și vascular
- Reglarea suportului
- Reglarea suportului pentru picioare prin clichet
- Telecomandă pentru reglarea pozițiilor
- Auto-CPR
- Sistem de regresie automată pe spătar
- Contorizare automată
- Șine laterale din HPL și aluminiu, blocabile și escamotabile
- Platformă de saltea ABS ușor de îndepărtat
- Spătar HPL translucid cu raze X
- Tetiere și tăblițe detașabile din HPL și aluminiu
- Cadru metalic vopsit cu vopsea epoxidică electrostatică
- Stâlp IV din oțel inoxidabil cu înălțime reglabilă
- Bare de protecție din plastic pentru impact
- Rotile centrale cu blocare, 150 mm
- Gamă cuprinzătoare de accesorii disponibile
- Poziția scaunului cardiac
- Poziție de șoc
- Poziție semi-Fowler
- Poziția de ieșire din pat
- Poziție de examinare
- Activarea resuscitării cardio-respiratorii cu o singură apăsare de buton
- Panou de control al asistentei de la capătul piciorului
- Pârghii duble de resuscitare manuală laterală la spătar
- Spătar translucid cu raze X și suport pentru casete
- Acumulator de rezervă
- Extensie a dimensiunii patului (opțională)
- Sistem integrat de cântar de greutate marca Linak (opțional)

### DETALII TEHNICE

• Lungime totală	: 216 cm
• Lățime totală	: 102 cm
• Interval înălțime	: 46-82 cm
• Trendelenburg	: 0°-16°
• Trendelenburg invers	: 0°-16°
• Unghi spătar (Max.)	: 70°
• Unghi picioare (Max.)	: 40°
• Diametru roți	: 15 cm
• Spațiu sub pat	: 15 cm
• Greutate de lucru (cu accesorii)	: 250 kg

### DATE ELECTRICE

• Alimentare	: 1.5A max. At 230V AC 50-60 Hz
• Protecție scurt-circuit	: Clasa I, Tip B
• Protecție anti-lichide	: IPX6
• Baterii	: 2x 12V în serie, etanșe, reîncărcabile, plumb / acid gel, 1.2 amp hr



**Pat electronic pentru terapie intensivă,  
cu coloane motorizate**

**Accesorii**




Spătar transparent raze X HPL



Panou de comandă la picioare



Acumulator de rezervă

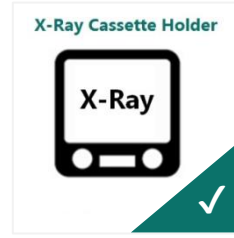

Suport casetă raze X la spătar



CPR manual dublu la spătar



Role cu frână 150mm



Raft pentru asistentă



Sistem de cântărire



Suport pungă urină



Extensie pat



Stâlp pentru ridicare



Raft pentru defibrilator



Suport cilindru oxigen



Sistem tracțiune ortopedi

**Opțiuni de culoare**



H01



H02



H03



H04



H05



H06



H07



H08

