




ALVO Rapsodia

Perfect pentru următoarele discipline:

-  Chirurgie bariatrică
-  Cardiovascular
-  Chirurgie colorectală
-  Chirurgie generală
-  Ginecologie
-  Chirurgie minim invazivă
-  Neurochirurgie
-  Oftalmologie
-  Ortopedie și Traumatologie
-  Otorinolaringologie
-  Chirurgie dorsală
-  Urologie



* Opțiuni disponibile:

- suport motorizat pentru picioare
- acționare alternativă

Funcții controlate de la distanță:



Înălțime



Trendelenburg /
Trendelenburg
invers



Înclinare
laterală



Deplasare
longitudinală



Secțiune
pt spate



Suport pentru
picioare *



Nivelare
masă



Poziție
flex



Poziție
reflex



Frână

Masă de operații mobilă universală cu specificații competitive


Ergonomie de lucru

- design ergonomic al bazei pentru un acces chirurgical nerestricționat, cu o secțiune de picior interschimbabilă și o bază subțire în lateral
- margini netede pentru a împiedica căderea lichidelor pe podea



Configurare ușoară

- configurare și înlocuire rapidă a segmentelor datorită conectării cu clic a segmentelor

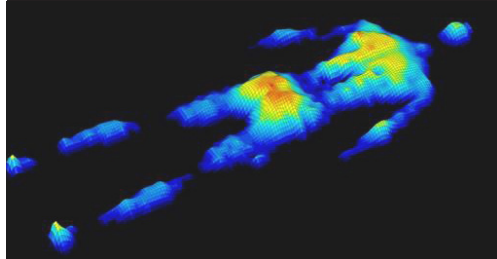


Prevenirea ulcerărilor de presiune intraoperativă

- cu pad-uri moi impermeabile fixate cu ultrasunete

Prevenirea infecțiilor la locul intervenției

- cu pad-uri de masă fără arici și bare laterale elegante pentru o curățare mai ușoară

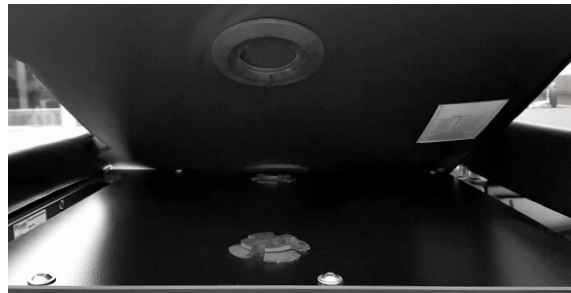

Interfețe intuitive de comandă

- control intuitiv cu telecomandă cu iluminare din spate (atât standard, cât și fără fir) sau, alternativ, prin intermediul panoului de control cu integrare OR (ALVO Integra)



ALVO Rapsodia

ALVO Rapsodia oferă o gamă excepțională de reglare a înălțimii de 610 - 1240 mm (fără pad-uri), care, combinată cu o deplasare longitudinală de 420 mm, o face să fie combinația perfectă pentru orice nivel de lucru dorit.

Capacitatea de încărcare maximă de 320 kg, cea mai bună din clasa sa, la orice articulație, permite utilizarea într-o varietate de discipline chirurgicale, inclusiv în chirurgia bariatrică.

ALVO Rapsodia este compatibilă cu întregul portofoliu al liniei de accesorii ALVO pentru a se adapta la aproape orice poziție chirurgicală.

Parametri tehnici ALVO Rapsodia


Lungime masă Modular 5 secțiuni	2110 mm (2125 mm*) 2115 mm	Trendelenburg	40°
Lățime masă	500 mm	Trendelenburg invers	40°
Lățime masă (cu bare laterale)	560 mm	Deplasare longitudinală	420 mm
Reglarea înălțimii (fără pad-uri)	610 - 1240 mm	Greutatea mesei	300 kg
Reglarea spătarului	80° / -30°	Capacitate dinamică max. **	275 kg
Reglarea suportului pentru picioare	20° / -90°	Capacitate statică max. (peste bază)	320 kg
Retragerea suportului pentru picioare	180°	Alimentare	24 V
Reglarea înclinării laterale	30° / -30°	Durată încărcare baterie	< 12h
Reglarea tetierei	45° / -45°	Timp de lucru între 2 încărcări	aprox. 60 operatii
Reglare motorizată suport picioare (opt)	80°/-90°	Încărcător baterie	incorporat
Înălțimea bancului pentru rinichi (opt)	150 mm	Curent de încărcare	230 V ~50/60 Hz
		Marcaj internațional de protecție	IP-X4

* valabil pentru masa modulară cu suport motorizat pentru picioare

** sarcina admisă în orientarea inversă a mesei: 160 kg



Imagistică intraoperatorie îmbunătățită cu deplasare longitudinală extinsă (420 mm)

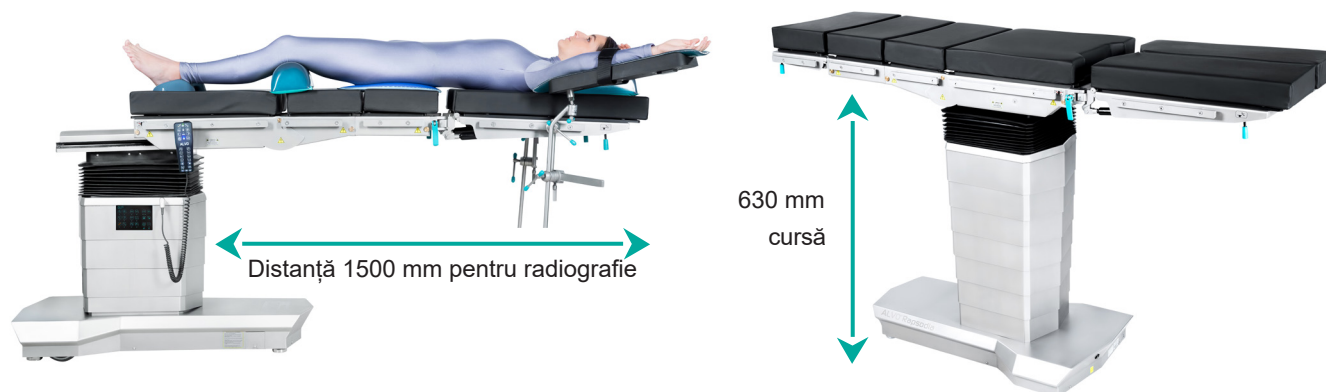

Masă de operații mobilă universală cu specificații competitive



Intervale ample de
reglare pentru diferite
discipline chirurgicale

