


Pat cu ridicare completă

VG-TLB425T

Primul pas pentru o mobilitate timpurie



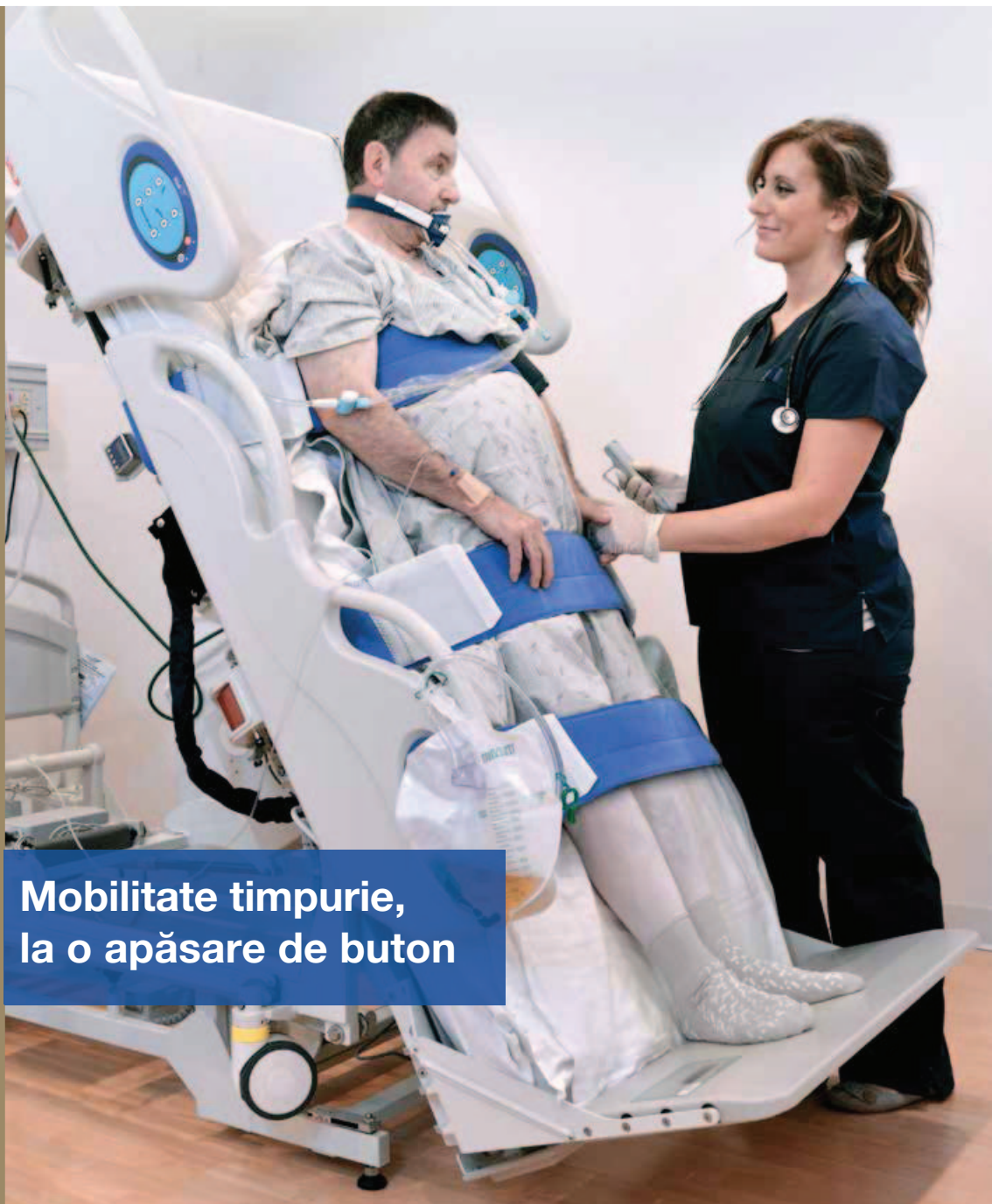

Celelalte 23 de ore

Mobilitatea timpurie nu trebuie să fie doar o oră pe zi. Cu TLB puteți mobiliza pacienții toată ziua prin apăsarea unui buton, cu un singur îngrijitor, minimizând în același timp riscul de rănire atât pentru personal, cât și pentru pacient.

Sistem patentat de control al greutateii

Urmăriți progresul mobilității cum nu ați mai făcut-o până acum! Pe măsură ce patul se înclină, ecranul digital afișează greutatea suportată (ca valoare și procent), iar înclinometrul oferă date despre unghiul de înclinare. Îngrijitorii pot controla și ajusta greutatea portată și poziția față de verticală, ajustând un grad mai mare de mobilitate și incluzând mersul și disponibilitatea pentru ambulatoriu în funcție de posibilitățile fiecărui pacient.

Integrare

Patul cu ridicare completă se integrează perfect în protocoalele de mobilitate timpurie existente și în programele de gestionare sigură a pacienților. Datorită capacității de a sta vertical și de a-i mobiliza pe pacienți, de a ajuta la redistribuirea presiunii de la fese și umeri spre picioare, patul se integrează bine și în inițiativele de prevenire a căderilor și de îngrijire a rănilor.

Siguranță la verticală


Un sistem de curele flexibile ajută la fixarea pacientului pe poziție în timpul deplasării și poziționării la verticală. Materialul este confortabil și poate fi spălat sau schimbat între pacienți.





CPR de urgență

SCAUN

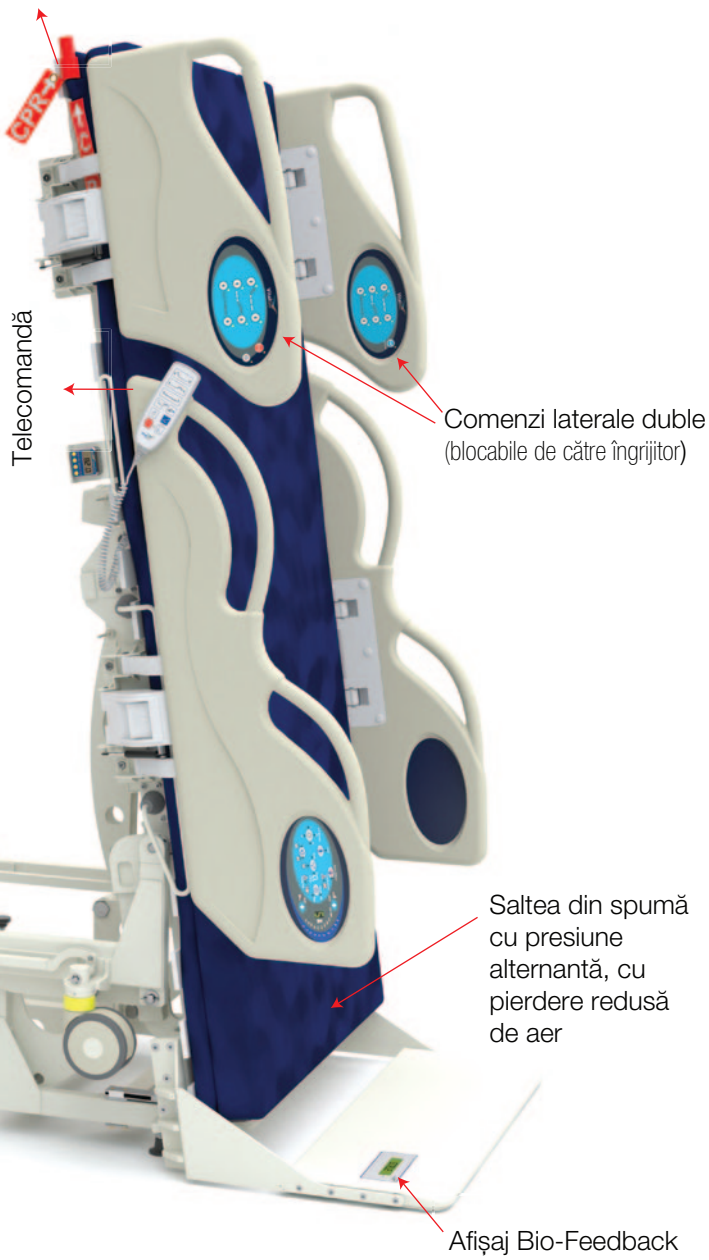

Trendelenburg



**Pat bariatric
cu ridicare completă**

Disponibil și în
versiunea bariatrică,
cu o greutate
de 425 kg



Specificații TLB 425T

Model # 425T


Descriere model: Early Mobility Deck

Disponibil pe piata din: Ianuarie 2015

Generatie model: Third Generation


Specificații:

Lungime totală (în poziție neutră)	85.83 " (218 cm)
Lungime totală (extins complet)	89.76" (228 cm)
Lățime totală	40.95" (104 cm)
Lățime totală (fără mânerle laterale)	37.00" (94 cm)
Platformă la podea (poziție coborâtă)	20.67" (52,5 cm)
Platformă la podea (poziție înălțată)	29.72" (75,5 cm)
Poziție verticală (de sus până la podea)	88.00" (223,5 cm)
Role	05.00" (12,70 cm)
Spațiu sub pat	05.50" (14,00 cm)
Capacitate greutate utilizator	425lbs (193 kg)
Capacitate maximă sigură	616LB (280 kg)

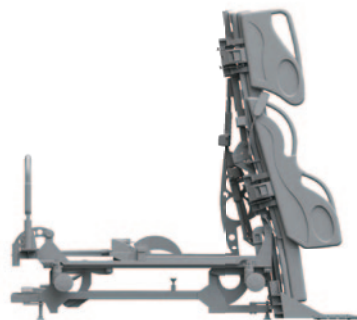

Tensiune

Curent alternativ	100V-AC/120V-AC/230V 6.8AMax/5AMax/3A
Frecvență maximă	50-60HZ/60Hz/50HZ
Putere	200W/280W/280W
Temperatură ambientală de lucru	50°F (+10°) - 104°F (+40°C)
Interval umiditate relativă	30%-70%
Interval presiune	700hPa-1060hPa

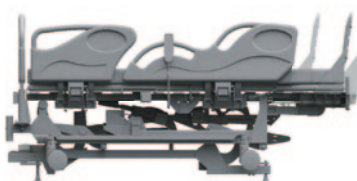

Caracteristici:

Aducere completă la verticală	Da
Trendelenburg	Da
Poziție scaun picioare jos	Da
Poziție scaun picioare sus	Da
Cântar	Da
Sistem de control al greutății	Da
Alarmă părăsire pat	Da
Apelare îngrijitor	Opțional
Disponibil: spumă, aer, LAL, AP	



Saltea

CPR saltea	CLRT
Comenzi pacient	Da
Blocare comenzi pacient	Da, laterale
Comenzi alternative personal	Da
Eliberare tetieră pentru CPR	Da, laterale
Funcție CPR electronică	Da
Laterale pliabile	Da
Opțiuni IV, trapez, suport butelie oxigen	Opțional
Roți unidirecționale	Da
Comandă manuală	Da



Caracteristici unice:

Modul Mobilitate Timpurie (ridică patul complet)	Da până la 82°
Placă de rezistență exerciții de mobilitate șezând	Da
Placă de picioare reglabilă electronic	Da
Sistem control al greutății	Da
Curele de suport pentru mobilitate timpurie	Da
Acces sub pat pentru curățenie	Da
Roțile se auto-retrag de la sol în timpul utilizării	Da
Protocoale Mobilitate Timpurie disponibile	Da
Mod bypass soft	Da
Afișaj Bio Feedback pe placa de rezistență	Da



Siguranță și reglementări

Înregistrare FDA	Da
Înregistrare CE	Da

Testare și conformitate:

IEC 60601-1 2005
EN60601-1:2006 (ediția 3)
EN60601-2-52 (prima ediție)